


TRULICITY® - WICHTIGE INFORMATIONEN IM ÜBERBLICK


Wo spritzen?

- Ihr Arzt, Apotheker oder Ihr medizinisches Fachpersonal kann Ihnen helfen, die Injektionsstelle auszuwählen, die für Sie am besten geeignet ist.
- Sie können Ihr Arzneimittel in Ihren Bauch (Abdomen) oder Oberschenkel injizieren.
- Eine andere Person kann die Injektion in Ihren Oberarm spritzen.
- Wechseln Sie Ihre Injektionsstelle jede Woche. Sie können dieselbe Körperregion nutzen, aber stellen Sie sicher, dass Sie an dieser Körperregion eine andere Injektionsstelle auswählen.

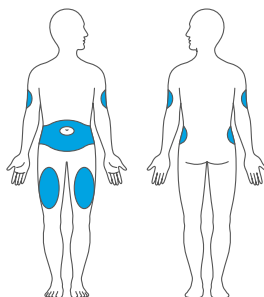

Wo entsorgen?

- Entsorgen Sie den Trulicity®-Pen mit dem normalen Hausmüll.

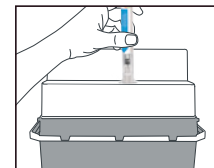

Was ist GLP-1 und wie wirkt Trulicity®?


GLP-1 ist ein natürliches Hormon, das beim Essen freigesetzt wird. Wenn Sie Typ-2-Diabetes haben, produziert Ihr Körper möglicherweise nicht genügend davon.

- Es teilt Ihrer **Bauchspeicheldrüse** mit, wie viel Insulin nach einer Mahlzeit freigesetzt werden soll.
- Es kann einschränken, wie viel Zucker aus Ihrer **Leber** ins Blut gelangt.
- Es verlangsamt die Geschwindigkeit, mit der Nahrung Ihren **Magen** verlässt.
- Es kann Ihren Appetit reduzieren (dennoch ist Trulicity® kein Produkt zur Gewichtsreduktion).
- Diese Wirkungen können dazu beitragen, Ihre Blutzuckerwerte zu senken. Ein GLP-1 Rezeptoragonist imitiert diese Wirkung.

Wo lagern?

- Bewahren Sie Ihren Pen im Kühlschrank auf.
- Wenn eine Kühlung nicht möglich ist, können Sie Ihren Pen bis zu 14 Tagen bei Raumtemperatur (unter 30 °C) aufbewahren.
- Die vollständige Information zur korrekten Aufbewahrung entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation.

Die ANWENDUNG VON TRULICITY® SCHRITT FÜR SCHRITT.

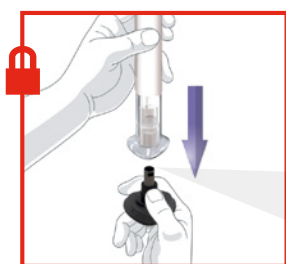


Graue Kappe



1. KAPPE ABZIEHEN



2. AUFSETZEN UND ENTRIEGELN

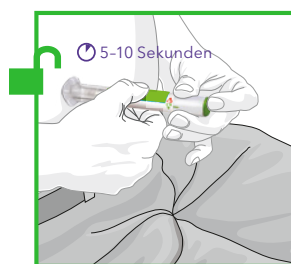

3. DRÜCKEN UND HALTEN



- Überprüfen Sie, dass der Pen **verriegelt** ist.
- Ziehen Sie die graue Kappe ab.
- Setzen Sie die Kappe nicht wieder auf. Das könnte die Nadel beschädigen. Berühren Sie nicht die Nadel.
- Nach dem Abziehen sollte die graue Kappe wie auf der Abbildung aussehen.

Falls die graue Kappe nicht wie oben abgebildet aussieht:

- Verwenden Sie den Pen **NICHT**.
- Verwerfen Sie den Pen und die Kappe sicher und kontaktieren Sie Lilly.
- Verwenden Sie einen neuen Pen.

- Setzen Sie das durchsichtige Unterteil des Pens an der Injektionsstelle flach und fest auf die Haut auf.
- **Entriegeln** Sie den Pen durch Drehen des Sicherungsringes.

- Drücken und halten Sie den grünen Injektionsknopf. Sie werden ein lautes Klicken hören.
- **Drücken** Sie das durchsichtige Unterteil des Pens weiter fest gegen die Haut, bis Sie ein zweites Klicken hören. Dies passiert nach etwa 5-10 Sekunden, wenn die Nadel sich zurückzieht.
- Nehmen Sie den Pen von der Injektionsstelle.
- Wenn der graue Bereich sichtbar ist, wissen Sie, dass die Injektion vollständig abgeschlossen ist.

UNSER SERVICE

Videos zur einfachen Anwendung und Wirkweise (in verschiedenen Sprachen) finden Sie hier (Passwort: Zucker):

Hier Videos ansehen



Oder rufen Sie uns an unter:
 ☎ Telefon: 06172 - 273 2222 Mo.-Fr. 09:00-15:00 Uhr
 @ med_info@lilly.com

Leben so normal wie möglich | www.lilly-pharma.de
www.lilly-diabetes.de

WEITERE INFORMATIONEN ENTNEHMEN SIE BITTE DER GEBRAUCHSANWEISUNG.

