


TRULICITY® – ОБЗОР ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ.


Куда инъектировать?

- Ваш врач может помочь Вам при выборе оптимального для Вас участка для инъекции.
- Вы можете инъектировать медикамент себе в живот или же в верхнюю часть бедра.
- Третье лицо может выполнить инъекцию в Ваше плечо.
- Вы можете каждую неделю использовать для инъекции один и тот же регион тела. При этом избегайте, пожалуйста, инъекции точно в одно и то же место.

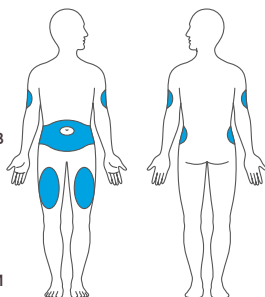

Где утилизировать?

- Шприц-ручку Trulicity® следует выбрасывать с обычным бытовым мусором.

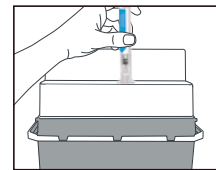

Что представляет собой GLP-1, и как действует препарат Trulicity®?


GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1) – это естественный гормон, который вырабатывается во время еды. Если у Вас сахарный диабет 2-го типа, то не исключено, что Ваш организм вырабатывает недостаточное количество этого гормона.

- Он сообщает **поджелудочной железе**, сколько инсулина нужно выделять после еды.
- Он может ограничивать количество сахара, поступающего из **печени** в кровь.
- Он снижает скорость эвакуации пищи из **желудка** в кишечник.
- Он может снижать аппетит (хотя Trulicity® не является продуктом для похудения).
- Эти эффекты могут помочь снизить уровень сахара в крови. Агонист рецепторов GLP-1 имитирует этот эффект.

Где хранить?

- Храните свой шприц-ручку в холодильнике.
- Если обеспечить охлаждение невозможно, Вы можете хранить свой шприц-ручку при комнатной температуре (ниже 30°C) на протяжении периода до 14 дней.
- Подробную информацию о правильном хранении прочитайте в информационном листке-вкладыше.

ПРИМЕНЕНИЕ TRULICITY® ШАГ ЗА ШАГОМ.

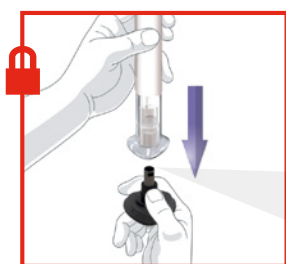

Серый колпачок



1. СНЯТЬ КОЛПАЧОК

- Убедитесь в том, что шприц-ручка **заблокирован**.
- Снимите серый колпачок.
- Не заменяйте колпачок. Это могло бы повредить иглу. Не прикасайтесь к игле.
- После снятия серый колпачок должен выглядеть, как показано на рисунке.

Если серый колпачок выглядит не так, как на рисунке выше:

- Ручку использовать **НЕЛЬЗЯ**.
- Положите ручку и колпачок в безопасное место и свяжитесь с компанией Lilly.
- Возьмите новую ручку.



2. УСТАНОВИТЬ И РАЗБЛОКИРОВАТЬ

- Ровно установите прозрачную нижнюю часть шприца-ручки на участке для инъекции и плотно прижмите шприц-ручку к своей коже.

При помощи поворота стопорного кольца **разблокируйте** шприц-ручку.



3. НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ

- Нажмите и удерживайте нажатой зеленую кнопку для инъекции; Вы услышите один щелчок.
- Продолжайте плотно прижимать шприц-ручку к своей коже до тех пор, пока Вы не услышите второй щелчок. Это произойдет примерно через 5–10 секунд после втягивания иглы.
- Отведите шприц-ручку от участка для инъекции.



- Если в расположенном под этикеткой смотровом окошке Вашего шприца-ручки станет видима серая деталь, то Вы поймете, что Ваша инъекция полностью завершена.

НАША СЛУЖБА

Видеоролики о простом использовании и механизме действия (на разных языках) находится здесь (пароль: Zucker):

Смотреть видеоролики здесь



Или просто позвоните нам по этому номеру:

☎ Телефон: 06172 - 273 22 22 Пн. – Пт. с 09:00 до 15:00
@ med_info@lilly.com

Leben so normal wie möglich |

www.lilly-pharma.de
www.lilly-diabetes.de

СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ.